



韩国新创医疗股份有限公司
中文宣传册

NEOGENESIS

地址 首尔市永登浦区永登浦路150, 思想工厂C栋307号 (07292)
电话 +82-2-583-1348 传真 +82-2-2038-0848 邮箱 info@neogenesis.co.kr
官方网站 www.neogenesis.co.kr

www.neogenesis.co.kr

NEOGENESIS

About Us

公司名	NEOGENESIS
代表理事	金容珢
成立日	2012年10月16日
主营业务	自体细胞治疗器械研究开发 / 宣传策划 / 出口贸易
地址	首尔市永登浦区永登浦路150, 思想工厂C栋307号 (07292)
邮箱	info@neogenesis.co.kr
电话	02. 583. 1348
传真	02. 2038. 0848

全球化

Global Network



NEOGENESIS公司
是以自体细胞治疗相关医疗器械的专业性, 迈向全球市场, 蒸蒸日上的先进领导企业。

品牌故事

Brand Story

‘生物组织再生性’
为您带来健康美丽生活

NEOGENESIS

自我治愈能力
关注人体的奥秘

我们人体与生俱来的“自我治愈”能力,
可修复并再生因各种外部因素受损的组织, 从而恢复其健康的初始状态。
我们一直专注人体基本的自我修复功能。
从人体诞生的奥秘以及奇妙的生命力中, 寻找我们
原始的、健康的、美丽的秘密。

开创自体细胞治疗先河
引领全球医疗健康

如同神秘的人体来源于单个干细胞的多重分化,
我们从研发第一款“Unistation™”多功能干细胞治疗仪开始,
现已跃升为提供各种尖端医疗产品的全球性公司。
NEOGENESIS凭借在干细胞和自体细胞治疗方面的专业知识,
为世界医疗健康产业做出源源不断的贡献。

皮肤天然的健康活力
重塑自然纯洁的美

初始的纯白与清新, 这种原始状态是我们追求真正美的标准。
NEOGENESIS开发最符合我们人体的物质, 为“促进皮肤自我
再生”和“预防衰老”提供医疗美容解决方案。
通过对人体自然活力的不断探究, 实现了让肌肤年龄倒流, 重新焕发新生。

健康美的原动力
开启美好明天

携手NEOGENESIS体验从里到外散发的健康美,
重获内外兼修的独特美丽。



目录

TABLE OF CONTENTS

介绍	NEOGENESIS	2
	全球化	
	品牌故事	3
细胞治疗	多功能干细胞治疗仪	6
	离心机系列	8
	PRP离心管系列	10
	PRP激活器	12
	自体血浆凝胶机	13
	自动化双荧光细胞计数仪	14
医疗美容	NEO点痣笔	16
	阿库娅水光枪	17
	丽革水光系列	18
	丽革三文鱼系列	20
	丽革玻尿酸系列	22
	NEO针头系列	24
	奈尔菲	26
	奈尔贝拉溶脂	27
	NEO线雕系列	28
医药品	NEO麻膏系列	34
	NEOTOX	36
术后修复	贝塔葡聚糖修复系列	38
	瑞丝氧气面膜	40

细胞治疗

- 多功能干细胞治疗仪
- 离心机系列
- PRP离心管系列
- PRP激活器
- 自体血浆凝胶机
- 自动化双荧光细胞计数仪



UNISTATION
多功能干细胞治疗仪



压缩型“多功能”干细胞治疗仪: 离心机 + 恒温箱 + 振荡器
将移植的脂肪存活率从30%提高为74%



简易流程

简易的脂肪干细胞提取方法, 四项流程一键即可完成



浓缩率高

与其他竞争产品相比, 脂肪干细胞浓度高出62%



保障安全

内部配备硅胶恒温箱的密闭系统, 确保安全性



大容量工序

仅需50分钟就可以一次性处理最多800ml的脂肪




耗材低廉

提供合理的耗材费用, 间接降低了医疗成本费用

细胞辅助脂肪移植术 (CAL)


将从脂肪中分离出的SVF添加到等量相同的自体脂肪中, 可使脂肪成活率平均提高230%。

多功能干细胞治疗仪经过优化, 可轻松提取血管基质成分细胞 (SVF) 和脂肪源性干细胞 (ADSC)。

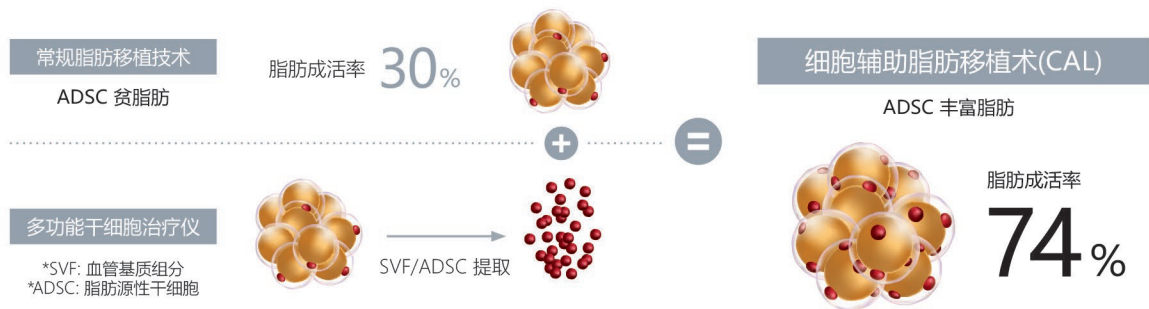

脂肪源性干细胞应用领域

脂肪组织是干细胞最丰富的来源之一。
干细胞具有细胞全能性, 能在体内分化成各种组织,
是未来医疗产业和治疗疑难杂症的核心。

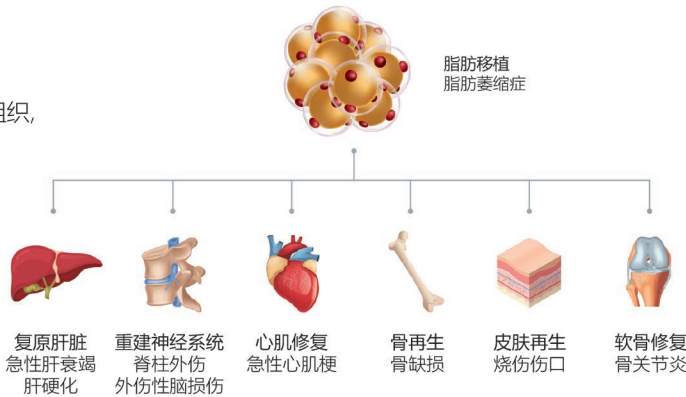

产品构成



产品规格

最大RPM/RCF (水平转子)	3,600rpm / 2,898xg
最大容量	800cc (50cc x 4 x 4)
温度范围	常温 ~ +40°C
噪音等级	≤60dB
加速/减速	9 / 10级
内存系统数	100
显示器	蓝光LCD显示屏 / 弹出式按钮
电源	230V / 50~60Hz (110V 可选)
要求功率	1.5kVA
尺寸 (W x D x H)	540 x 650 x 380mm
重量 (机身 / 配件)	58.5kg / 6~11kg

功能_ 预热, 定时, RPM/RCF转换, 动态失衡感应, 安全盖锁, 防止开盖跌落, 完成自动开合盖

NEOGENESIS CENTRIFUGE SERIES

NEOGENESIS 离心机系列



坚固耐用性强, 专为临床和实验操作设计的台式智能化离心机
最大为400ml和4000rpm的性能, 可实现精密分离



人工智能

自动开盖和提醒
功能防止不平衡,
超速和过热



10种程序

简单的一键操作
即可实现10种
不同的运行程序



旋转模式细腻

柔和的加速及减
速模式适用于制
造精密的分离



使用舒适

防振和气流盖的
设计减少了运行
中的噪音和热量



2级生物安全

气密性吊桶和转
子符合世卫组织
2级生物安全标准

GENESIS离心机

水平转子型离心机兼容所有通用的离心管尺寸
- 最大容量: 400ml (100ml x 4)

兼容性

原版 _ Neo(10cc), Genesis(15cc), Pure(20cc) PRP离心管
+ 锥形离心管(15cc & 50cc)
特别版 _ 原版 + Cure(30cc) & Omni(60cc) PRP离心管

产品规格

最大RPM/RCF (水平转子)	4,000rpm / 2,700xg
最大容量	400cc (100cc x 4)
存储程序数	10
噪音等级	≤52dB
加速 / 减速	≤20秒 / ≤25秒
显示屏	蓝光LCD显示屏 / 弹出式按钮
电源	230V / 50~60Hz (110V 可选)
要求功率	340VA, 保险管: 6A
尺寸 (W x D x H)	375 x 480 x 260mm
重量 (机身 / 配件)	23kg / 1~2kg

功能 _ 时间控制, RPM/RCF转换, 动态失衡感应, 安全盖锁,
防止开盖跌落, 完成后自动开盖, 静态旋转模式



产品构成

原版套装



特别版套装



NEO离心机

角转子型离心机适用于小于15ml的离心管操作
- 最大容量: 90ml (15ml x 6)

兼容性

NEO(10cc) PRP离心管 + 锥形离心管(15cc)



转子组件
10cc转子&吊桶 (6个)

产品规格

最大RPM/RCF (角转子)	4,000rpm / 2,075xg
最大容量	90cc (15cc x 6)
存储程序数	10
噪音等级	≤52dB
加速 / 减速	≤20秒 / ≤25秒
显示屏	蓝光LCD显示屏 / 弹出式按钮
电源	230V / 50~60Hz (110V 可选)
要求功率	140VA, 保险管: 6A
尺寸 (W x D x H)	296 x 412 x 206mm
重量	17.5kg

功能 _ 定时, RPM/RCF转换, 动态失衡感应, 安全盖锁,
防止开盖跌落, 完成自动开盖


NEOGENESIS PRP KIT SERIES

NEOGENESIS PRP离心管系列



通过“螺旋式”离心管轻松提取最大48倍的高浓缩血小板

弯颈设计专利, 可在无任何细胞损失下获得最大提取量

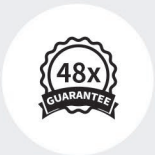

最高浓缩率

无关使用者熟练度, 都能提取最高浓缩量



无菌系统

无任何污染的密封系统&无菌离心管



各种型号

10cc至60cc 5种不同的离心管供你选择



血浆量控制

可根据不同需求自由控制并提取血浆量



角式&摆式

可与一般的角式和摆式离心机相兼容


富血小板血浆 (PRP) 操作原理

PRP是通过离心分离出的血液层, 其中浓缩的血小板可直接用于受伤部位来促进组织愈合。

NEOGENESIS PRP离心管专为离心而研发设计, 通过螺旋拧座向上推动PRP层, 任何人都可轻松获得PRP。




血小板作用

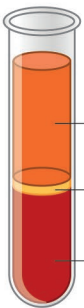

离心后的血液构成

- 55%贫血小板血浆 (PPP)
 - 91%水
 - 7%蛋白质/纤维素
 - 2%营养素/激素/电解液
- 1%富血小板血浆 (PRP)
血小板 (生长因子) / 白细胞
- 44%红细胞 (RBC)

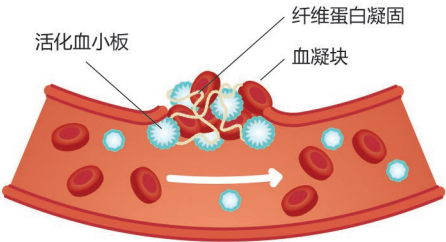

血小板和纤维蛋白一起凝结发挥止血作用, 并用生长因子治愈伤口

PRP应用领域



整形外科/皮肤科



牙科



妇科



骨科/康复科



皮肤科 (脱发)



兽医外科

型号规格



产品名称	Neo PRP (10cc)	Genesis PRP (15cc)	Pure PRP (20cc)	Cure PRP (30cc)	Omni PRP (60cc)
血小板浓度	最大8倍 (1ml PRP)	最大13倍 (1ml PRP)	最大16倍 (1ml PRP)	最大25倍 (1ml PRP)	最大48倍 (6ml PRP)
离心机类型	角转子 & 水平转子	水平转子	水平转子	仅限Genesis离心机特别版	仅限Genesis离心机特别版
兼容离心管	15cc 锥形离心管	50cc 锥形离心管	50cc 锥形离心管	特定尺寸	特定尺寸
外形尺寸(D x H)	15.2 x 124.8mm	29.3 x 105mm	29.3 x 122mm	30.5 x 118mm	35.7 x 125.4mm
产品构成	10g kit x 2个	25g kit x 1个	28g kit x 1个	43g kit x 1个	45g kit x 1个

PRP ACTIVATOR
PRP激活器



利用毛细血管压力研制的唯一一个“非化学”血小板激活器
通过刺激生长因子使PRP的治疗效果加倍



非化学性

不同于一般的
化学激活剂, 100%
安全无副作用



效果显著

比氯化钙效果好,
并与凝血酶效果
相同



迅速激活

通过3分钟简单
的物理作用后
即可使用



采血量减少

减少采血量的
同时, 增加了
PRP治疗效果

细胞治疗

PLASMA GEL
自体血浆凝胶机




采用血液制造的小型自体血浆填充制造机
一键启动, 只需17分钟即可完成



天然安全

由患者自身血液
制成的安全且天然
无害的填充剂

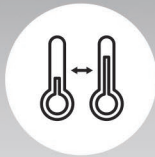

2段热控制

自动控制加热装
置, 可以优化凝胶
质地和耐久性



节约成本

PRP治疗中剩余的
血浆可用作免费的
填充剂



工艺均匀


一次最多可制造
6cc质感均匀的
血浆填充剂



血小板活性化原理

人体内的血小板通过对血管壁的异常, 如组织损伤, 炎症, 心血管疾病做出反应并激活。
NEOGENESIS PRP激活器针对这种异常反应, 无需使用任何化学药剂来激活血小板。

通过毛细血管压力进行物理活化

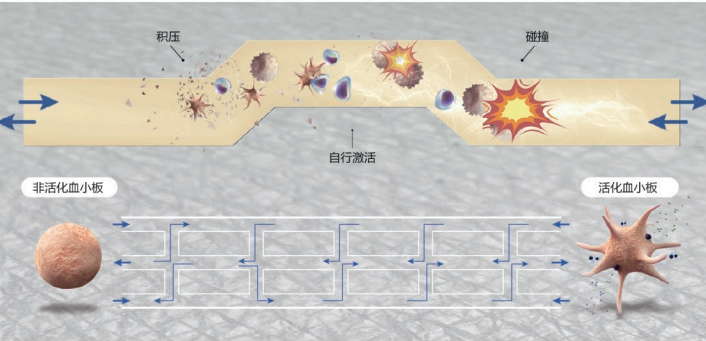

来回的挤压使血小板反复进入复杂的人工毛细血管中

活化后血小板内成分
细胞因子 & 趋化因子 / 粘附分子 / 血小板微泡 / *生长因子


* 生长因子 _ TGF- β , bFGF, PDGFA-b, EGF, VEGF, CTGF
细胞增殖, 胶原蛋白生成, 透明质酸生成, 表皮细胞生长, 血管生成

活化剂	无 (物理激活)
激活所需时间	3~5分钟
兼容的注射器	所有鲁尔锁注射器
外部尺寸 (D x H)	21 x 72mm
产品构成	13g kit x 2个

自体血浆填充凝胶生成原理

血浆蛋白如纤维蛋白原, 白蛋白, 球蛋白在加热时具有乳化和凝胶化的特性。
NEOGENESIS自体血浆凝胶机优化了1cc注射器的温度设置, 可制造出塑形自然且有质感的自体填充剂。

2段自动热控制

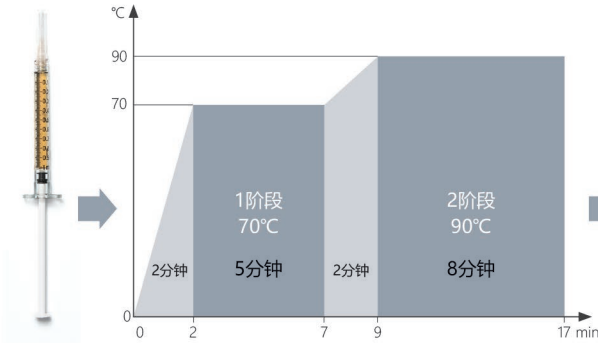

1阶段 _ 血浆中的氯化钠加速了血液中蛋白质的沉淀。
2阶段 _ 加热使血清乳白并凝固, 最终变成凝胶。

产品规格

最大容量	6cc (1cc x 6)	
制造时间	0 ~ 70°C 预热	2分钟
	70°C 加热	5分钟
	70 ~ 90°C 预热	2分钟
	90°C 加热	8分钟
	总共17分钟	
显示器	红色LED屏幕和按钮	
尺寸 (W x D x H)	180 x 160 x 148mm	
重量	1.95kg *不含AC适配器	

功能 _ 当前温度显示, 自动加热控制, 完成时提醒,
紧急停止按钮, 高度调控托架

LUNA-STEM
自动化双荧光
细胞计数仪



检测干细胞和血管基质组分的全自动“双荧光”细胞计数仪
精确的区分活细胞, 死细胞和无核细胞



智能化显示屏
通过屏幕的图像,
分析细胞生存能
力并筛选分类



快速识别
通过高度的灵敏性,
在30~60秒内
精准的得到结果



CSV & PDF
自动生成CSV&PDF
数据报告,
可用USB存储




光子透明玻片
采用获得专利的
精密玻片, 让细
胞分布更均匀


双荧光 + 明视野

使用吖啶橙(AO)和碘化丙啶(PI)分别对活细胞和死细胞进行染色, 可以准确区分和统计SVF的有核细胞。
自动化双荧光细胞计数仪可以识别所有类型的有核细胞(干细胞, 生殖细胞, 成熟细胞)和无核细胞(红细胞, 微量元素), 这是其他细胞计数器所无法做到的。

血管基质组分(SVF)

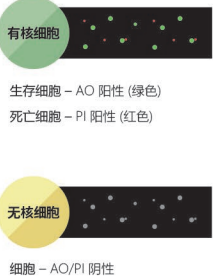

光学镜构造

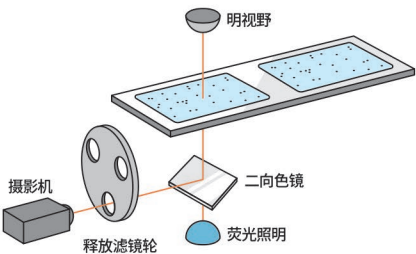

产品规格

取样容积	10μL
细胞计数时间	30 ~ 60秒 (取决于样品条件)
细胞浓度 (最佳)	$5 \times 10^4 \sim 2 \times 10^7$ cells/mL
细胞大小 (大小/最佳)	1 ~ 90μm / 5 ~ 60μm
激发波长	470 ± 20nm
发射波长	530 ± 25nm, 600nm (LP)
光源	LED
LCD显示屏	7 英尺 (800×480分辨率)
图像分辨率	5MP
尺寸 (W×D×H)	22×21×9cm
重量	1.8kg *AC适配器除外

医疗美容

- NEO点痣笔
- 阿库娅水光枪
- 丽革水光系列
- 丽革三文鱼系列
- 丽革玻尿酸系列
- NEO针头系列
- 奈尔菲
- 奈尔贝拉溶脂
- NEO线雕系列



SPOTLESS
NEO点痣笔

CE ISO



“多功能”等离子点痣笔, 用于祛除皮肤瑕疵, 增强皮肤弹性
无接触, 切口, 疤痕和出血, 就可安全祛除皮肤瑕疵




操作简单

直观的调节按钮
和使用方法,
无需复杂操作



性能稳定

24V高输出, 提供
最高高达60Hz的
稳定波长

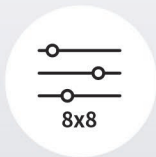

精细调控

64种能量组合,
功率和频率的
8阶段调档功能设置



多功能

具有一般针头,
锐针头, 钝针头,
点阵探头, 应用广泛



性价比高


可媲美大型医疗
点痣器械, 实现
效果和便捷性双赢

采用等离子能量非接触点痣法

射频产生等离子能量, 在无接触下使细胞蒸发, 刺激成纤维细胞, 促进胶原蛋白的合成和皮肤再生。

点痣笔配备4个针头, 64种能量设置, 能更细致地治疗各种类型的皮肤瑕疵, 皱纹及毛孔粗大。

点痣笔作用原理

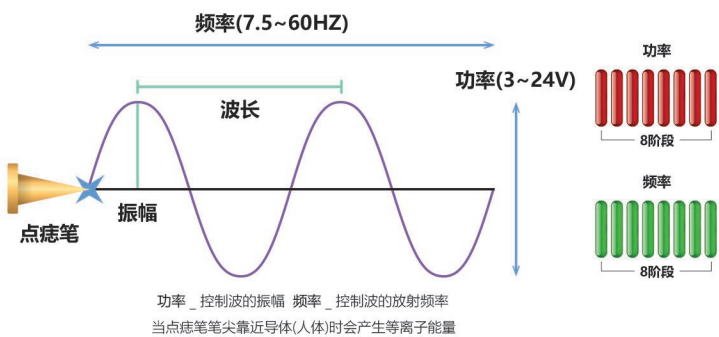

消耗品&产品规格

使用部位	痣, 雀斑, 疣, 赘疣, 麦粒肿, 汗管瘤, 除皱, 提拉, 祛痘等
电源	110~240V / 60Hz, 0.5A
电压电极	DC 24V, 1A
体积 (宽 x 长 x 高)	170 x 35 x 15mm
重量 (机身 / 配件)	53g
产品构成	机体, 电源线, 针头 (2个钝针头 + 1个锐针头)

*消耗品种类 一般针头/锐针头/平面针头/点阵探头

功能 _ 功率和频率调节(8阶段)

AQUAMATE
阿库娅水光枪

ISO



兼容各种注射器与溶液的最新型无线水光枪
可精准调控注射器大小, 剂量, 速度与粘度



快速&精准

使用九针无菌针头,
维持固定出量与间
距均匀注射



稳定注射

自动反转柱塞与稳
定的泵电机提供强
大的防漏液支持



自动注入模式

根据使用者的需求
可自由选择手动或
连续自动注射模式



LCD显示屏

符合人体工学的设计
与清晰可见的
1.6英寸LCD显示屏



超长待机时间


一次充电续航90分
钟无线操作的强大
电池性能

48度注射角度, 最大限度减少手腕疲劳

注射角度为90°的皮下注射水光枪会引发操作者的手腕疲劳。

阿库娅水光枪将手柄倾斜度设置成注射最佳角度48度, 便于操作者精准操作, 同时降低疲劳感。

阿库娅水光枪的工作原理

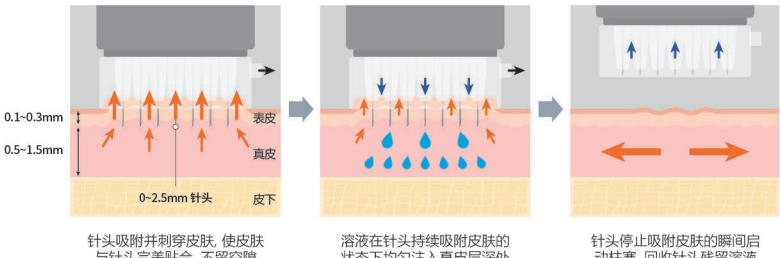

*阿库娅水光枪的泵可以吸收因操作失误造成的漏液, 让针头保持干净卫生的状态, 为下一次的术手做好准备。

产品构成与消耗品

最大容量	5cc 以下所有类型注射器
控制画面	1.6英寸LCD屏幕
电压电伏	100~240V / 50~60Hz, 0.35A
电池类型	充电型锂电池 (7.4V D.C 3,500mAh)
体积 (宽 x 长 x 高)	220 x 40 x 190mm
重量	470g
产品构成	机身, 充电器, 电池, 过滤模块 (泵过滤器2个 + 软管3个)

*消耗品种类 34G 9-针头
32G 9-针头(0~2.5mm 深度可调节)

搭载功能 _ 吸水管/注射量/粘度 剂量 可调节

REGENOVUE AQUA SHINE SERIES
丽革水光系列



“高纯度”透明质酸给予你由内而外的超强水润动力
只需要一周就能感受到皮肤的容光焕发



非动物性HA
内毒素含量低于
0.0015IU/mg的
非动物性HA



细微颗粒
细微的HA颗粒
能够更均匀的扩
散到真皮深处



效果更持久
交联技术的效果
持续时间是竞争
产品的两倍



亲和人体
PH值和渗透压
接近人体环境,
更安全放心



快速恢复
15分钟治疗,
皮肤损伤小,
快速恢复到日常

均匀的透明质酸(HA)细微颗粒

HA是一种存在于人体内的天然物质, 随着年龄的增长而减少, 它可以在组织细胞内存储高达自身重量1000倍的水分。

丽革水光将高纯度HA浓缩物直接供应到皮肤内, 可立即改善皮肤弹性, 防止老化。

HA颗粒比较

丽革水光

丽革水光与竞争产品相比,
HA颗粒更加精细均匀

M公司/N产品

A公司/J产品

L公司/Y产品

HA的功效

改善皱纹

增强弹性

缩小毛孔

深层补水

改善气色

产品规格



产品名称	丽革水光 (银)	丽革水光 (金)
主要成分	透明质酸 15mg/ml	
交联与否	非交联	微交联
注射深度	真皮浅层/中层	真皮中层/深层
治疗周期	4周3次	8周3次
	*根据患者情况调整治疗次数	
持续时间	3~5个月	6~8个月
产品构成	3ml 注射器 x 3支 & 助推器(重复使用) x 1个	

REGENOVUE PN SERIES
丽革三文鱼系列



三文鱼DNA中提取的PN成分, 从根本修复皮肤屏障的中胚层疗法
只需一针就能实现肉毒杆菌, 玻尿酸和水光的所有效果



生物相容性

与人类的生物相容性高达94%, 安全又有效



修复皮肤屏障

将因老化变薄的皮肤屏障, 提高1.5倍的临床结果



独特合成

PN和HA的合成能释放更强的补水再生效果



均匀颗粒

防止丁达尔现象的均匀颗粒能注射至皮肤真皮层




无皮肤损伤

相当于激光提拉效果, 无皮肤炎症和损伤

比PDRN更优秀的PN

从鲑鱼中提取的多核苷酸(PN)具有比PDRN更高的分子量, 浓度和DNA链值, 能更好的提供皮肤再生效果。
丽革PN通过与透明质酸(HA)独有的合成技术, 比传统的PDRN产品吸收更好, 维持时间更长。

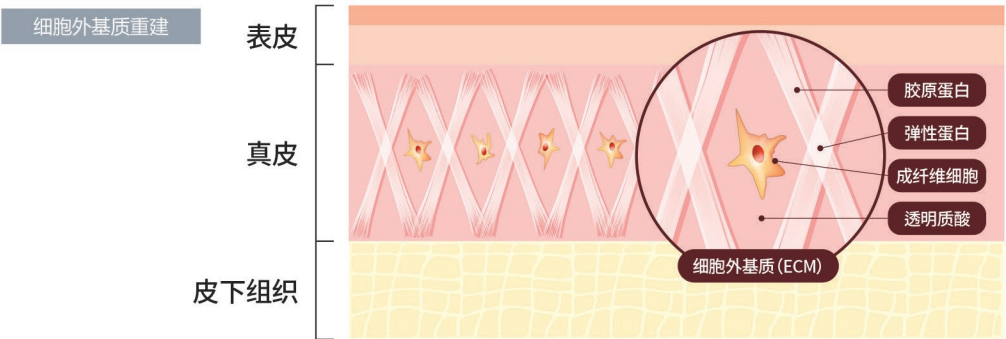

PN能改善真皮内 (ECM) 环境, 并刺激胶原蛋白, 弹性蛋白和成纤维细胞合成。
PN通过再生和修复真皮层来增强皮肤屏障。

PN+HA的效果



产品规格



产品名称	丽革PN (银)	丽革PN (金)
主要成分	HA 20mg/ml + PN 5mg/ml	HA 15mg/ml + PN 5mg/ml
交联与否	非交联	微交联
注射深度	真皮浅层/中层	真皮中层/深层
治疗周期	4周3次	8周3次
持续时间	3~5个月	6~8个月
产品构成	3ml 注射器 & 助推器(重复使用) x 1个	

REGENOVUE FILLER SERIES

丽革玻尿酸系列

CE KFDA GMP ISO



100%完全交联, 安全系数高的单相玻尿酸

质地均匀的结构赋予你完美精致的塑形体验

完全交联

通过特殊交联技术在减少BDDE的同时实现完全交联

无内毒素残留

内毒素小于0.0015IU/mg, 未检测出BDDE残留

弹性持久

相比竞争产品, 塑形效果的持久度和弹性高出45%

高粘性

粘性高出同类产品31%, 塑形丰满且无移位或变形


注入感稳定

稳定顺畅的注射压力给予使用者舒适的治疗体验

丽革玻尿酸均匀的交联结构

玻尿酸可根据交联技术以液体和凝胶两种共存的形态制造。

丽革玻尿酸的凝胶结构均匀, 可提供丰盈自然的填充效果, 让塑形变得更简单更精致。

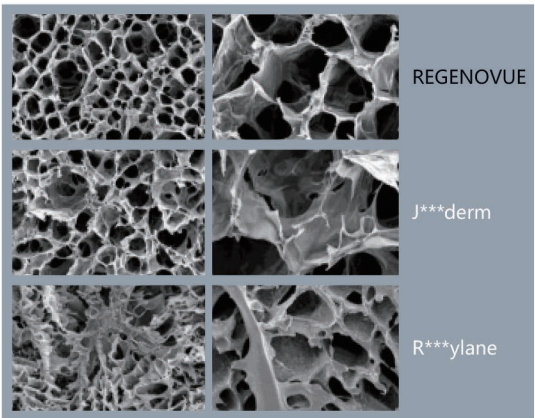

*与其他产品相比, 丽革玻尿酸结构更加周密且具有规律性。

丽革小分子/中分子/大分子

三种分子大小的凝胶可塑造出不同立体感的脸部专用玻尿酸

- [PLUS]产品包含利多卡因, 提供无痛舒适的填充



产品名称	丽革小分子 / 小分子 [含麻]	丽革中分子 / 中分子 [含麻]	丽革大分子 / 大分子 [含麻]
主要成分	交联 HA 24mg/ml + 利多卡因 0.1ml (含麻产品)		
适用部位	浅皱纹, 鱼尾纹, 眉间纹, 颈纹等	中/深皱纹, 法令纹, 脸 & 嘴唇 & 额头等	深皱纹, 鼻梁 & 下巴等
持续时间	8~12个月	12~18个月	
包装规格	1个注射器 (1.0ml/1.1ml) & 1 x 30G, 1 x 27G针头	1个注射器 (1.0ml/1.1ml) & 2 x 27G针头	1个注射器 (1.0ml/1.1ml) & 1 x 27G, 1 x 25G针头
CE	所有型号获得CE认证		

丽革丰体针

专为身体塑形和填充特制的丽革丰体针

弹力和持久力加强, 大容量适用于重塑乳房, 臀部, 盆骨和小腿等

主要成分	交联 HA 24mg/ml
适用部位	胸部, 臀部, 盆骨, 小腿
持续时间	24个月
包装规格	10ml 注射器 x 1个

*高弹性使效果持续时间高达24个月



NEO NEEDLE SERIES

NEO针头系列



用于所有医疗和美容皮下注射治疗的“灭菌”锐针&钝针

超过35种不同长度和厚度的型号供您选择



注射柔顺

超薄壁和宽内径，
使液体流动
更加顺畅



表面光滑

无毛刺切割式
抛光&硅涂层
表面加工



医疗安全性

医用级聚丙烯和
EO灭菌处理的
不锈钢




标准设计

形状、尺寸和颜
色的设计符合国
际ISO标准

比一般针头内径加宽18%

通过针头将产品的溶液注入皮肤，
所以针头的尺寸、质量和安全性尤为重要。
NEOGENESIS锐针&钝针具有光滑表面和
较宽的内径，能让注射更顺畅且不损伤皮肤组织。

针头内径比较

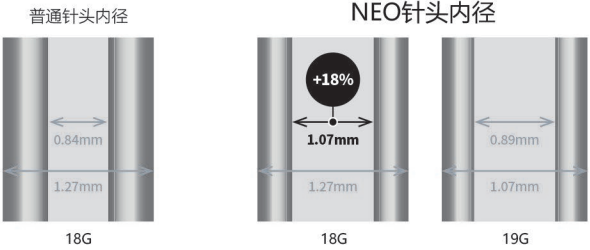

与其他同规格产品相比较，凭借卓越的技术制造的NEO针头内径更宽

NEO填充钝针

用于精准的玻尿酸填充和脂肪移植
的高品质钝针

- 防止静脉注射，血管损伤和淤伤能达到最小化
- 多次注射的入口点少，可减少皮肤损伤



产品型号

NEO填充钝针

针号	针长	型号
30G	25mm	FC3025
	30mm	FC3030
27G	30mm	FC2730
	40mm	FC2740
	50mm	FC2750
25G	40mm	FC2540
	50mm	FC2550
	70mm	FC2570
24G	50mm	FC2450
	30mm	FC2330
23G	50mm	FC2350
	70mm	FC2370
22G	50mm	FC2250
	50mm	FC2150
21G	70mm	FC2170

NEO填充钝针 (脂肪移植)

针号	针长	型号
20G	50mm	FC2050
	70mm	FC2070
19G	50mm	FC1950
	70mm	FC1970
18G	50mm	FC1850
	70mm	FC1870
17G	70mm	FC1770

NEO填充钝针 (胸部专用钝针)

17G	100mm	FC17100
	120mm	FC17120
	150mm	FC17150
14G	100mm	FC14100
	150mm	FC14150
	200mm	FC14200

20根 / 盒 *标有刻度的精密施术用针头，可以额外定制

NEO纳米无痛针

用于肉毒杆菌毒素等皮下注射
以及局部麻醉的精细针头

- 平滑柔和的注入，减少了出血，
肿胀和疼痛



产品型号

NEO纳米无痛针

针号	针长	型号
34G	4mm	NN3404
	6mm	NN3406
33G	4mm	NN3304
	6mm	NN3306
	13mm	NN3313
30G	4mm	NN3004
	13mm	NN3013

100根 / 盒

NEOFILL
奈尔菲童颜针



经FDA成分验证的新一代PLLA填充物
由玉米和土豆淀粉等安全成分组成。



成分安全

经FDA批准，安全的PLLA成分



稀释时间短

与需要1小时或更长时间的产品相比，完全稀释只需30分钟



注入后不移位

PLLA微粒注入肌底后，在不移位的情况下修复填充真皮层



均匀的微粒

由均匀的圆形粒子组成，形成自然轮廓均匀扩散




持久有效

比玻尿酸维持更长，至少可维持2年以上

新一代2合1高端填充剂 - 玻尿酸&胶原蛋白促进剂

从肌底让PLLA微粒诱导胶原蛋白合成并再生皮肤组织。
当细胞流入PLLA微粒的孔隙一段时间后，就会生成胶原蛋白，从而达到恢复肌肤自然膨润的效果。

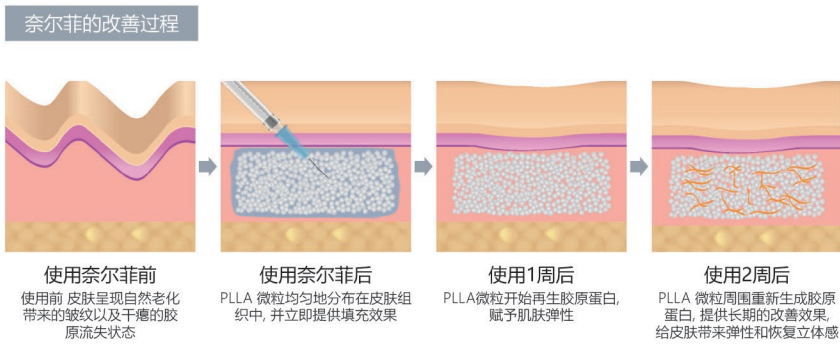

产品规格	
主要成分	PLLA (聚左旋乳酸) 82mg/ml
注入深度	深层真皮层
施术周期	以一个月为间隔 2~3次
注射深度	24~32个月
产品构成	200mg x 1瓶

NEOBELLA
奈尔贝拉溶脂



FDA认证的脱氧胆酸成分，改善面部和身体曲线的脂肪溶解剂
仅需几周就能明显见效，无疼痛和不良反应



非手术治疗

通过安全简单的注射治疗肥胖并矫正体型效果显著



无副作用

无肿胀，发红，血肿，神经损伤或麻痹等副作用



见效快

治疗间隔为4~7天，能在短期内看到满意的效果



双重分解

一般脂肪分解加上低渗性分解可达到永久轮廓效果




应用广泛

用于包括脸部在内的所有身体脂肪堆积的部位

独有的脱氧胆酸(DCA)配比

脱氧胆酸是我们体内的一种天然物质，可以在消化过程中进行分解，是FDA唯一认证的脂肪溶解注射剂。
奈尔贝拉的DCA配方与竞争产品相比，副作用明显减少，进行反复治疗也能保障满意的效果和安全性。

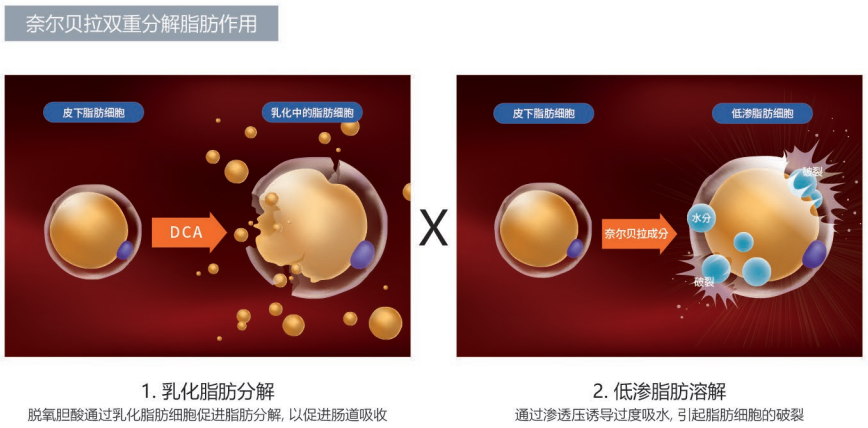

产品规格	
主要成分	脱氧胆酸 5mg/ml
注射深度	皮下脂肪层
治疗周期	注射5~6次，一次一瓶（间隔4~7天）
	*以1~2cm间隔距离注射局部肥胖部位
持续时间	永久效果
产品构成	8ml x 5瓶

NEO THREAD SERIES

NEO线雕系列

CE KFDA ISO

强效提升, 改善皱纹和生成胶原蛋白的高品质医用提拉线

包含PDO, PLLA和PCL材质的120多种型号, 应用范围广泛



材料安全

FDA认证, 环氧乙烷灭菌, 可降解的安全材质



耐用性

独特的加工和密封技术, 能有效隔绝空气污染



锐针&钝针

高品质的不锈钢硅涂层, 可以实现平滑注入皮肤



脚手架效应

蛋白线可与干细胞和PRP复合治疗, 让效果加倍




专属定制

根据不同需求, 可特别定制专属品牌和型号

蛋白线提拉原理

蛋白线提拉是一种非手术治疗方式, 能迅速且持久的改善皮肤松弛和皱纹, 恢复弹性。

NEO线雕系列专注于原材料品质, 精细的手工制作, 提供无断线优质的治疗体验。

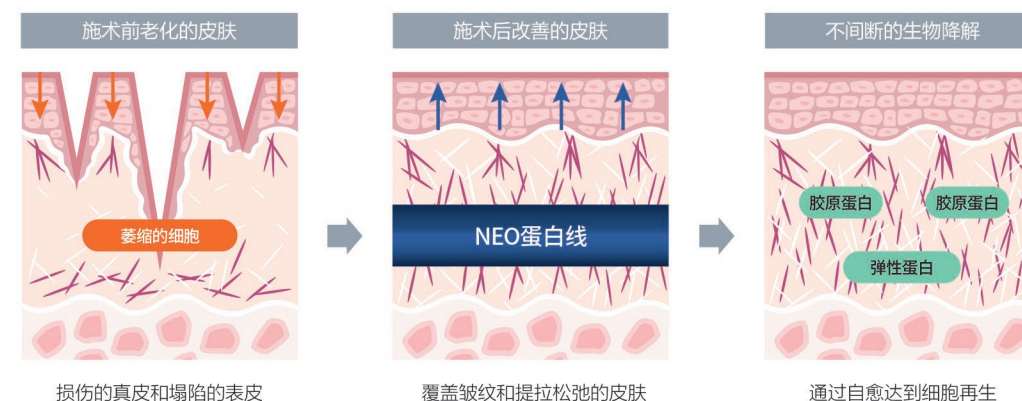


NEO线雕三种材质



PDO (聚二氧六环酮)

卓越的效果 / 优秀的安全性 / 性价比好
使用范围最广泛的材质

- 临床30年以上的心血管手术安全记录
- 世界公认的胶原蛋白生成基础提拉线

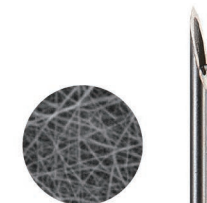

PLLA (聚左旋乳酸)

填充效果强 / 生成胶原蛋白
植物提取的医疗缝合材质

- 1型和3型胶原蛋白生成提高25%的填充效果
- 包含玻尿酸和肉毒杆菌的优点, 还能提供提拉效果



PCL (聚己内酯)

最自然的效果 / 最贴合肤质
效果维持最久的材质

- 特别为医美研发的新概念提拉线
- 较高的张力可持续提供36个月的胶原蛋白生成



基础蛋白线 (平滑线 / 螺旋线)

- 面部和颈部细纹
- 钝针适合眼部敏感区域

产品名称	针号	针长	线长	型号
平滑线 (单线)	31G	12mm	16mm	M3112
		25.4mm	30mm	M3125
	30G	18mm	30mm	M3018
		25.4mm	30mm	M3025
	29G	38mm	50mm	M3038
		25.4mm	30mm	M2925
		38mm	50mm	M2938
	27G	50mm	70mm	M2950
		60mm	90mm	M2960
		38mm	50mm	M2738
		50mm	70mm	M2750
	26G	60mm	90mm	M2760
		90mm	150mm	M2790
		38mm	50mm	M2638
	25G	50mm	70mm	M2650
		60mm	90mm	M2660
		90mm	150mm	M2690
螺旋线 (单线缠绕针管)	31G	12mm	16mm	S3112
		25.4mm	30mm	S3125
	30G	18mm	30mm	S3018
		25.4mm	30mm	S3025
	29G	38mm	50mm	S3038
		25.4mm	30mm	S2925
		38mm	50mm	S2938
	27G	50mm	70mm	S2950
		60mm	90mm	S2960
		38mm	50mm	S2738
		50mm	70mm	S2750
	26G	60mm	90mm	S2760
		90mm	150mm	S2790
		38mm	50mm	S2638
	25G	50mm	70mm	S2650
		60mm	90mm	S2660
		90mm	150mm	S2690
*U型眼钝针 (平滑/螺旋)	30G	25.4mm	30mm	M3025-C
		25.4mm	30mm	S3025-C
	29G	38mm	50mm	M2938-C
		38mm	50mm	S2938-C

1包20根 *1包10根

交叉线 (双线 / 三线 / 双线螺旋)

- 面部和颈部深皱纹
- 可与干细胞和PRP复合治疗, 提高细胞悬挂附着率

产品名称	针号	针长	线长	型号
交叉线: 双线 (两股线交缠)	27G	38mm	50mm	T2738
		50mm	70mm	T2750
		60mm	90mm	T2760
	26G	38mm	50mm	T2638
		50mm	70mm	T2650
		60mm	90mm	T2660
		90mm	150mm	T2690
	25G	60mm	90mm	T2560
		90mm	150mm	T2590
交叉线: 三线 (三股线交缠)	26G	38mm	50mm	TR2638
		50mm	70mm	TR2650
		60mm	90mm	TR2660
	25G	60mm	90mm	TR2560
		90mm	150mm	TR2590
	23G	60mm	90mm	TR2360
		90mm	150mm	TR2390
交叉线: 双线螺旋 (两股螺旋线交缠围绕针管)	27G	50mm	70mm	TS2750
	26G	38mm	50mm	TS2638
		50mm	70mm	TS2650
		60mm	90mm	TS2660
	25G	60mm	90mm	TS2560
		90mm	150mm	TS2590
	23G	60mm	90mm	TS2360
		90mm	150mm	TS2390

1包20根

大V线 (大V线 / 鼻线 / 压印线)

- 脸部松弛, 双下巴和身体轮廓
- 360°双向锯齿状起到强力提拉作用



小V线 (小V线 / 双针线)

- 脸部松弛, 双下巴和身体轮廓
- 360°多方向锯齿达到细腻的提拉作用



产品名称	针号	针长	线长	型号
大V线 (360°-双向)	19G	70mm	110mm	C1970
		100mm	140mm	C19100
U型大V线 (360°-双向)	19G	70mm	110mm	C1970-C
		100mm	140mm	C19100-C
U型大V线 (双向)	19G	100mm	140mm	C19100B-C
W型大V线 (双向)	18G	100mm	140mm	C18100B-C
*L型鼻线 (单向)	19G	38mm	50mm	C1938N-C
		50mm	80mm	C1950N-C
		70mm	110mm	C1970N-C
*W型压印线 (鱼骨形-双向)	19G	100mm	150mm	C19100M-C
	18G	100mm	150mm	C18100M-C
*W型压印线 (锯齿形-双向)	18G	100mm	150mm	C18100M2-C


1包20根 *1包10根

产品名称	针号	针长	线长	型号
小V线 (360°-多方向)	23G	38mm	50mm	B2338
		50mm	70mm	B2350
		60mm	90mm	B2360
		90mm	150mm	B2390
	21G	60mm	90mm	B2160
		90mm	150mm	B2190
U型小V线 (360°-多方向)	23G	38mm	50mm	B2338-C
		60mm	90mm	B2360-C
		90mm	150mm	B2390-C
	21G	60mm	90mm	B2160-C
		90mm	150mm	B2190-C
*双针线 (360°-多方向)	19G	110mm	290mm	D19110S
		110mm	440mm	D19110L

1包20根 *1包1个

特殊线 (山洞线 / 爆炸线 / 网管线)

- 填充深层皱纹及合成胶原蛋白
- 与玻尿酸联合施术效果佳

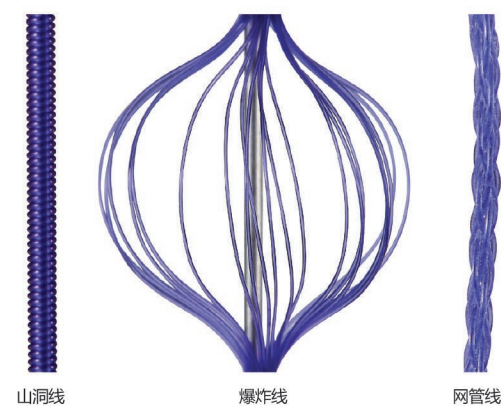

产品名称	针号	针长	线长	型号
L型山洞线 (螺旋弹簧状)	29G	50mm	320mm	V2950-C
	27G	50mm	310mm	V2750-C
	25G	50mm	410mm	V2550-C (5-0)
	23G	60mm	550mm	V2360-C (5-0)
		60mm	450mm	V2360-C (4-0)
	21G	70mm	380mm	V2170-C (2-0)
		60mm	440mm	V2160-C (4-0)
		60mm	380mm	V2160-C (3-0)
		60mm	340mm	V2160-C (2-0)
SS型山洞线 (螺旋弹簧状)	25G	50mm	410mm	V2550-C (4-0)
	23G	60mm	450mm	V2360-C (3-0)
	19G	70mm	470mm	V1970-C (0-0)
		70mm	420mm	V1970-C (1)
L型爆炸线 (多线复合)	23G	38mm	50mm	TF2338-C
		60mm	90mm	TF2360-C
L型网管线 (网管状)	19G	38mm	50mm	MS1938-C
		50mm	60mm	MS1950-C

1包10根

多种类型的锐针&钝针

根据多种类型的锐针和钝针, 实现最大化治疗效果, 并最小程度地减少组织损伤和细胞损失。



医药品

NEO麻膏系列
NEOTOX



NEO ANESTHETIC CREAM SERIES

NEO麻膏系列

CMF



有效作用于指定部位的正品局部麻醉乳膏

安全有效的麻痹神经并阻断疼痛信号



使用简单

无需特殊技能或工具即可轻松实现强效麻醉



低刺激性

国际公认的成分含量和混合比例，安全无刺激



质地清爽

白色无味水溶性配方，不黏腻且湿润清爽的质地



膏体稳定

强有力的高耐热技术可以防止产品膏体分裂




安全品质

可靠的“韩国制造”产品，严格遵守GMP标准

安全局部麻醉的原理

局部麻醉剂在物理上阻断了通往神经末端的钠离子通道，从而暂时性阻止了神经向大脑传递痛感信号。

NEO麻膏系列产品按照国际安全标准生产，完全杜绝了因含量过高或未经安全验证的假冒产品而引发的副作用。

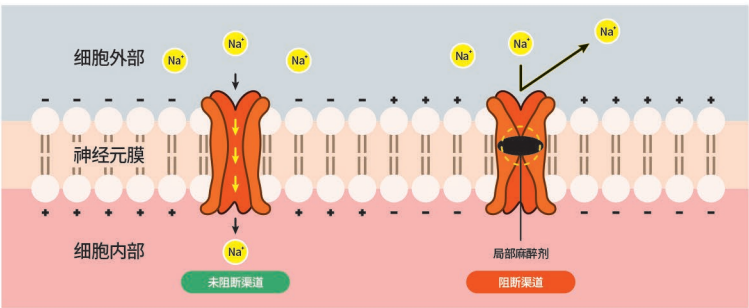

局部麻醉剂阻止了神经去极化，以暂时阻止神经冲动传导

应用领域



皮肤科



泌尿科



外科



医美



纹身

NEO-CAIN麻膏

含“10.56%利多卡因”，麻醉效果强且见效快的麻膏

- 正版产品带有ICS验证码，杜绝假冒伪劣风险

主要成分	利多卡因 105.6mg/g
产品性状	乳黄色或白色膏状
维持时间	45分钟+ (外敷15分钟+)
包装单位	30g 一管，500g 一罐
使用方法	取适当的膏药敷在相应的部位上，并用塑料膜包裹 (根据患者的情况，可调整敷用方法和外敷时间)



NEO-PRO麻膏

含“5%利多卡因-丙胺卡因”，更安全更强效的高性能麻膏

- 对心脏和神经的毒性低，代谢快，产品安全性高

- 长期外敷使用也无刺激，保护敏感和脆弱的肌肤

主要成分	利多卡因 25mg/g + 丙胺卡因 25mg/g
产品性状	白色膏状
维持时间	90分钟+ (外敷45分钟+)
包装单位	30g 一管，450g 一罐
使用方法	取适当的膏药敷在相应的部位上，并用塑料膜包裹 (根据患者的情况，可调整敷用方法和外敷时间)



NEOTOX
肉毒菌株



99.8%高纯度, 见效快又稳定的欧洲A型肉毒杆菌毒素
反复治疗无抗免疫原性, 能持续见效



正品菌株

选用欧洲国家研究所认证的原始正品肉毒杆菌菌株



安全认证

通过遵守cGMP标准生产设施生产



快速见效

真空减压干燥专利, 打造99.8%高纯度, 保证快速见效



抗性低

蛋白质含量比其它产品低61%, 具有低免疫原性特点



无不适感

理想的pH 6.7数值, 可以减少注射时的疼痛和刺激

荣获专利的真空减压干燥技术

真空减压干燥能在2小时内完成, 与20小时或更长时间的冷冻干燥相比, 神经毒素变质的可能性大大降低。

与传统的肉毒素产品相比, 使用专利技术制造的NEOTOX纯度更高, 可在更少量的注射下, 获得令人满意的效果



NEOTOX采用专利真空减压干燥技术制成

产品规格



干燥技术稳定性比较		
对比	冷冻干燥	真空减压干燥
制造时间	超过20个小时 (变质可能性高)	少于2个小时 (变质可能性低)
神经毒素毒性	高损耗	保存完整
生物活性	低活性	高活性, 高效果
蛋白质杂质	杂质多	杂质少, 抗性低

产品名称	NEOTOX 100U	NEOTOX 200U
主要成分	A型肉毒杆菌毒素	
性状	专利真空减压干燥法	
pH 浓度	pH 6.7	
保管温度	2~8°C 冷藏保管	
产品构成	100单位 x 1瓶	200单位 x 1瓶

术后修复

贝塔葡聚糖修复系列
瑞丝氧气面膜



BETA-GLUCAN RECOVERY SERIES

贝塔葡聚糖修复系列

CFR KCA CNP ISO



“院线专用”护肤品, 天然蘑菇萃取的葡聚糖精华

补水效果比透明质酸高20%, 能促进细胞恢复



天然成分

通过裂褶菌提取的
β-葡聚糖,
适用于所有肤质



排除毒素

强效的水化作用加
速排泄麻醉成分和
皮肤角质



消炎镇定

强大的消炎和镇
静效果可快速舒
缓受刺激的皮肤



皮肤再生

诱导胶原蛋白和
抗氧化物质合成
来修复皮肤



治疗效果

改善皮肤免疫力,
烧伤痕迹,
牛皮癣和脱发

优越的裂褶菌β-葡聚糖


β-葡聚糖对皮肤再生和免疫增强具有极好的作用, 来源于细菌、真菌、酵母和谷物中的多糖, 但其特性因来源而异。

我们的葡聚糖修复产品取自高品质裂褶菌的β-葡聚糖, 其药用价值高于任何其他葡聚糖复合碳水化合物。



裂褶菌的β-葡聚糖优点

裂褶菌的β-葡聚糖拥有卓越的免疫特性, 能抗真菌和肿瘤以及抗病毒活性。

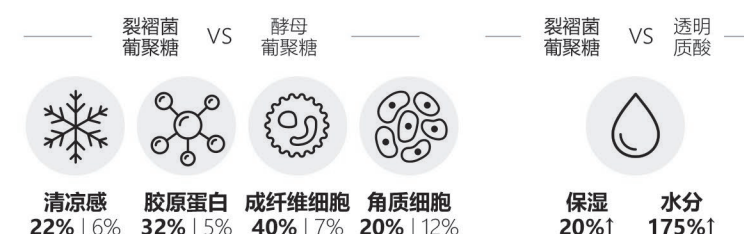

贝塔葡聚糖修复面膜

针对面部术后护理而研发的专用水凝胶面膜

- 具有良好的附着力, 不刺激术后的皮肤创口
- 高吸水性面膜材质能充分锁住浓缩的精华液

天然萃取物_裂褶菌β-葡聚糖&9种草药

产品构成_28g x 10片 * 上下分离型

贝塔葡聚糖修复精华

多功能精华配滴管式设计“方便日常使用”

- 高浓缩精华提供营养保湿, 解决水油失衡
- 适用于面部, 头皮和身体等各种症状

天然萃取物_裂褶菌β-葡聚糖

产品构成_15ml x 3瓶 / 盒

RIOX MASK

瑞丝氧气面膜

CFR KCA CNP ISO



采用CO2专利技术, 无需注射即可实现有效的羧基疗法

皮肤排毒让脸部线条更清晰, 肤色更显健康明亮



植物萃取

13种天然的
维生素成分,
使皮肤焕发光彩

皮肤排毒

释放的氧气能促
进皮肤新陈代
谢并清除杂质

脂肪分解

促进脂肪分解,
并收紧毛孔来
减少皮肤的松弛

高效率

相比传统的羧基
疗法, 疼痛和成本
以及时间减少

包装卫生


用于全脸和颈部
的独立凝胶包装,
卫生又方便

羧基疗法和波尔效应

羧基疗法是通过将二氧化碳注入皮肤来治疗由血液循环不良引起的脂肪团, 黑眼圈和妊娠纹等。

瑞丝氧气面膜的专利技术成功运用了羧基治疗的玻尔效应, 无需注射即可为皮肤提供丰富的氧气。

瑞丝氧气面膜原理

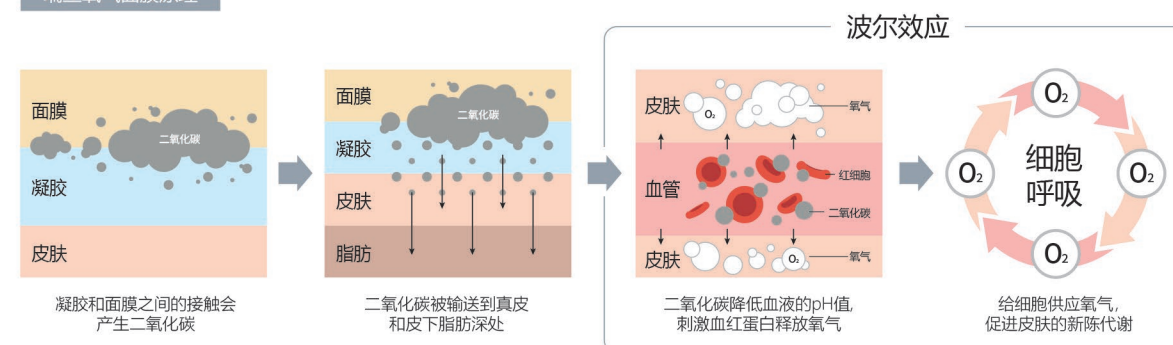

新陈代谢过程

血液循环 → 营养输送 → 能量转换 → 消除毒素 → 脂肪分解 → 废物排泄

瑞丝氧气面膜效果

消除粉刺
改善黑色素提亮肤色
减少黑眼圈分解脂肪
收紧毛孔消除妊娠纹
祛除皮下脂肪团改善血液循环
恢复皮肤光泽

自然萃取物_13种成分

甘草根, 蓝桉叶油, 赤松, 橡子, 朝鲜当归叶
川芎, 白芷根, 当归提取物, 菊花,
海棠, 玫瑰花, 槐花树苗, 金银花产品构成_25g凝胶注射器 x 5支
面部&颈部面膜纸 x 5套

